

GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

PASO 1 Enchufe la fuente de alimentación a una toma eléctrica y, seguidamente, a la unidad de control PULSE PRO.

PASO 2 Conecte el extremo largo del tubo flexible a la salida de aire de la parte frontal de la unidad de control PULSE PRO.

PASO 3 Póngase la funda (para pierna, brazo o cadera).


PASO 4 Acople los conectores para funda de cada funda a las salidas de aire de la caja de conexión.

PASO 5 Pulse el botón de encendido situado en la parte superior de la unidad de control PULSE PRO para encender el sistema.

EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO.

Cuando utilice el programa de masaje de NormaTec Pulse, lo primero que experimentará es un ciclo de preinflado, durante el cual las fundas conectadas se adaptarán a la perfección a la forma del cuerpo. Seguirá una sesión de compresión de los pies/las manos/la parte baja de la cadera (en función de las fundas que esté usando). Al igual que el amasamiento y los golpecitos que se realizan durante un masaje, cada segmento de la funda ejerce primero una compresión pulsada y la detiene. Esta secuencia se repite con cada segmento de la funda a medida que el programa de compresión va avanzando hasta el segmento superior de la funda.

Una vez que el último segmento de la funda termina el masaje, sigue un breve período de descanso tras el cual vuelve a iniciarse el ciclo desde los pies/las manos/la parte baja de la cadera (en función de la funda que esté usando). Cada sesión suele durar entre 20 y 60 minutos.

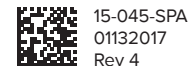

15-045-SPA
01132017
Rev 4

La sesión continuará aplicando el masaje hasta que el botón de duración de la pantalla de inicio indique 00:00:00, momento en el cual el ciclo en curso habrá terminado. Para parar el ciclo, toque QUIT (SALIR) o ADD TIME (AÑADIR TIEMPO) para prolongar la sesión. Si al cabo de dos minutos no se emprende ninguna acción, el ciclo finalizará y se restablecerá a la duración original de la sesión.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN.

ES POSIBLE REGULAR LA INTENSIDAD tocando el botón Intensity (Intensidad) de la pantalla de inicio. Se abrirá la pantalla Level Adjustment (Ajuste de nivel). Toque las flechas ascendente y descendente para ajustar el nivel de intensidad entre el 1 y el 10. Cuando termine, toque el botón Back (Atrás) de la parte superior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio.

LA DURACIÓN DE LA SESIÓN puede regularse tocando el botón Session Time (Duración de la sesión) de la pantalla de inicio. Se abrirá la pantalla Time Adjustment (Ajuste de tiempo). Toque las flechas ascendente y descendente para ajustar el número de minutos de la sesión. Cuando termine, toque el botón Back (Atrás) de la parte superior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio.

ZONE BOOST (INTENSIFICACIÓN POR ZONAS).

Durante la sesión, es posible incrementar la intensidad de una zona con la función Zone Boost (Intensificación por zonas). Esta función añade 60 segundos más de masaje, además de 10 mmHg más de presión en la zona seleccionada.

Para activar o desactivar la función, toque el botón Zone Boost (Intensificación por zonas) de la pantalla de inicio. Aparecerá en pantalla una imagen de la funda seleccionada. La zona seleccionada se mostrará en azul, mientras que las no seleccionadas aparecerán perfiladas. Para activar la función, toque la zona que desea seleccionar. Para desactivarla, toque una vez la zona seleccionada. Cuando termine, toque el botón Back (Atrás) para volver a la pantalla de inicio.

PAUSAR/FINALIZAR LA SESIÓN.

PARA PAUSAR LA SESIÓN en cualquier momento, toque el botón Pause (Pausar) de la pantalla de inicio. Al hacerlo, la sesión se detendrá temporalmente. Para reanudar una sesión pausada, toque el botón Resume Session (Reanudar la sesión).

PARA FINALIZAR UNA SESIÓN, toque el botón Pause (Pausar) y, a continuación, el botón Quit Session (Salir de la sesión). Cuando acabe de utilizar el sistema, retírese la(s) funda(s) de la(s) extremidad(es), apague el dispositivo y desconecte el tubo flexible NormaTec de la unidad de control PULSE PRO y de la caja de conexión.

LA BATERÍA INTERNA.

La batería está diseñada para poder utilizar el sistema NormaTec sin necesidad de disponer de una toma de corriente a proximidad. Aunque es perfecta para pasar un día fuera, la batería no está pensada para almacenar carga durante períodos largos, e irá descargándose lentamente del 100 al 0 % de carga en un lapso de 24 horas. Cuando el dispositivo está enchufado y no se encuentra en uso, la batería tarda unas seis horas en cargarse completamente.

Antes del primer uso, es necesario enchufar el dispositivo NormaTec PULSE PRO.

¿NECESITA AYUDA? ¿DESEA ENCARGAR ACCESORIOS?

Visite nuestro sitio web: www.NormaTecRecovery.com

Póngase en contacto con un representante de NormaTec llamando al +1 866.658.5996.

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES.

NTRRecovery
 NormaTecRecovery
 NTRRecovery
 @NTRRecovery

¿A QUÉ ESTÁ ESPERANDO?

LA VERDADERA RECUPERACIÓN EMPIEZA AHORA.

Guía de inicio rápido
de PULSE PRO

NORMATEC[®]
NORMATECRECOVERY.COM

